

LS2 Kit by D. Vinci

La particolare forma delle frese fornisce un taglio molto preciso dando un aspetto lucido alla superficie. Per il reso finale bisogna semplicemente lucidare con delle gomme e pasta diamantata per dare un aspetto lucido al restauro. Non è necessario effettuare una lucidatura della ceramica.

Le numerose lame delle frese realizzano un micro taglio della materia ciò e che permette di ritoccare anche le zone più fini senza rischiare di fratturare le ristorazioni. Le frese non surriscaldano la superficie di lavoro ciò che evita le micro fessure.

Domenico Vinci

Proprietario del laboratorio dentario Vinci Dental Concept, Domenico Vinci si è specializzato in protesi fisse estetiche, in implantologie e conta più di 30 anni di esperienza coi sistemi Full ceramica (Allumina, Zircono, Lithium disilicate...)



Attivo nel campo della ricerca clinica, è l'iniziatore di nuove tecniche protesiche e di studi scientifici. Dal 2005, Domenico Vinci è un'opinione leader per Ivoclar, Egli a la funzione in quanto conferenziere e formatore di livello internazionale.

Axis Dental


Axis Dental è un'impresa specializzata nella fabbricazione, commercializzazione e distribuzione di frese dentarie, perni e soluzioni di sbiancamento denti. Nata nel 1995 in Svizzera, Axis Dental ha per obiettivo di offrire a i medici dentisti le migliori soluzioni per semplificare il loro lavoro quotidiano pure garantendo dei risultati ed un'efficacia ottimale.

Axis Dental Sàrl.

Chemin du Closalet 4- 1023 Crissier- Switzerland
Tél +41 (0)21 633 06 33 - Fax +41 (0)21 633 06 39 - mail@axis-dental.ch - www.axis-dental.com

LS2 Kit by D. Vinci

La soluzione per il lavoro delle superfici
del Lithium Disilicate

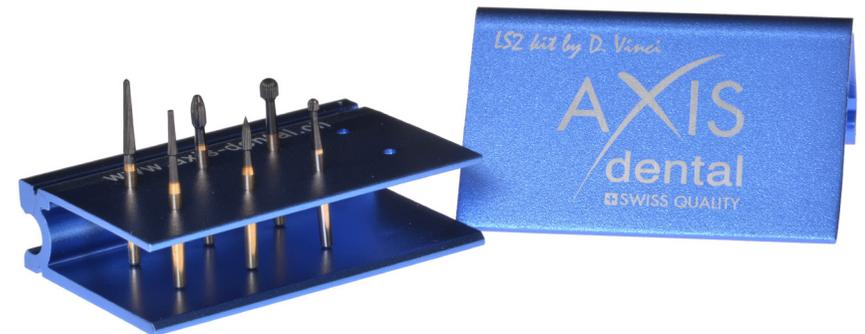

LS2 Kit by D. Vinci

Immaginato da Domenico Vinci,, *LS2 Kit by D. Vinci* è un assortimento di frese per il lavoro di superficie del lithium disilicate. Il suo trattamento DLC conferisce alle frese in carburo di tungsteno una durata di vita ineguagliata.

DLC FG 212.012 Taglio regolare e fine

Il suo angolo a 90° sulla sua punta permette di creare degli effetti di fessure molto fini e precise. Ideale per lo stato di superficie generale.



DLC FG 48.012 Taglio regolare e molto fine

La sua forma di punta dà degli effetti di superficie più precisa. Ideale per la rifinitura dei bordi molto fini, l'anatomia delle superfici occlusale e gli spazi interdentali. Elimina l'eccesso di incollatura dopo sigillatura tra la gengiva e la corona.



DLC FG 212RL.016 Taglio regolare e fine

Il suo angolo arrotondato sulla punta permette di togliere delle imperfezioni nell'interno della corona. Ideale per lo stato di superficie generale.



DLC FG 41.014 Taglio regolare e molto fine

La sua forma di palla dà degli effetti di superficie come perikymata. Ideale per il dégrossissage generale del modello e per i ritocchi occlusali dopo sigillatura.



DLC FG 44E.018 Taglio regolare ed aggressivo

La Sua forma di pera permette di dare degli effetti di superficie più importante. Ideale per la sgrossatura generale del modello ed per i ritocchi occlusali dopo sigillatura. Non utilizzare sui bordi fini.



DLC FG U 41.023 Taglio regolare e molto fine

La sua forma di palla dà degli effetti di superficie come perikymata. Ideale per il dégrossissage generale del modello e per i ritocchi occlusales dopo sigillatura.

